

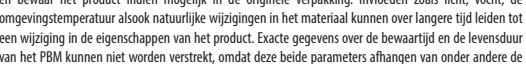
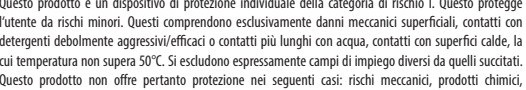
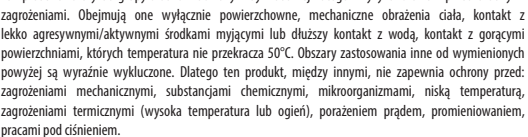


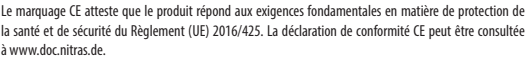

Schutzhandschuhe / Risikokategorie I

Protective gloves / Risk category I

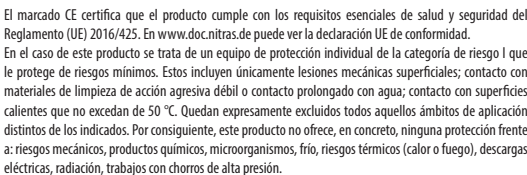

Phone: +49 2272 401 111
Mail: info@nitras-medical.com
Web: www.nitras-medical.com



pridēti ir šī informācijē brošiūrā arba parduoti jā AAP gавeju. Šuo tikslu informacinē brošiūra gali būti kopijuojama бe apribojimų.

Apsauginės pirštinės		I rizikos kategorija
Dydis (-žiai)	S - XL	
Sertifikavimas	EN 374	

Šis CE ženklas patvirtina, kad gaminyis atitinka esminius Reglamento (ES) 2016/425 reikalavimus dėl sveikatos apsaugos ir saugos. ES atitikties deklaraciją rasite www.doc.nitras.de.

Šis gaminyis – tai I rizikos kategorijos asmeninė apsaugos priemonė. Jis saugo nuo nedidelių pavojų. Šie pavojai apimta tik paviršinius fizinius sužalojimus, sąlytį su silpno poveikio / nedidelio agresyvumo valymo medžiagomis arba išgesęs trukmės sąlytį su vandeniu, sąlytį su karštais paviršiais, kurių temperatūra ne aukštesnė kaip 50 °C. Griežtai draudžiama naudoti gaminį kitiems tikslams nei prieš tai nurodyta. Todėl šis gaminyis, greta kitko, neapsaugo nuo: mechaninių pavojų, chemikalų, mikroorganizmų, šalčio, terminių pavojų (karščio ir arba) ugnies), elektros smūgių, spinduliavimo, aukšto slėgio srovės. Laikymas / naudojimas / tikrinimas: Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, ultravioletinių spindulių ar ozono šaltinių. Nelaikykite sulenkę arba uždėję sunkų svorį. Gamini stenkitės laikyti ir transportuoti originalioje pakuotėje. Dėl šviesos, drėgmės, temperatūros ir medžiagų natūralių pokyčių ir pan. poveikio per ilgą laiką gali pakisti gaminio savybės. Nejmanoma nurodyti AAP laikymo trukmės ir naudojimo laiko, kadangi abu šie parametrai priklauso nuo laikymo sąlygų, temperatūros, drėgmės, nusidėvėjimo lygio, naudojimo intensyvumo ir pan. Todėl po ilgesnio laikymo bei prieš kiekvieną naudojimą ir po jo patikrinkite, ar gaminyis nepažeistas bei nepakitę medžiagų savybės (pavyzdžiui, ar nesuskerdėjusios bei nesutrukinėjusios dangos bei medžiagos, ar nėra skylių, ar nepakitusios spalvos ir pan.). Kiekvieną kartą prieš naudojimą gaminį, patikrinkite, ar jis tinka numatytai veiklai ir yra tinkamo dydžio. Jokiu būdu nenaudokite netinkamų ar pažeistų gaminių bei sutvarkykite jų. Gaminio dydis gali skirtis nuo nurodytojo, pavyzdžiui, dėl išsištempimo.

Nurodymai dėl gaminio dėvėjimo: Prieš užsimaudami pirštines, patikrinkite, ar jūsų rankos švarios ir sausos. Įkiškite pirštus į pirštinę ir paėmę už suraukimo ar atlanko lengvai užmaukite pirštinę ant savo plaštakos. Atkreipkite, dėmesį ar pirštinės forma tinka jūsų plaštakai. Pirštinė turi gerai priglusti ties delnu, pirštais ir tarpupirščiais. Nagų lakas, papuošalai bei per stiprus tempimas ir traukimas gali pažeisti pirštines. Pirštines reikėtų nusimauti taip, kad jų išorinė pusė nepiršiliestų prie drabužių ar odos, nes ji gali būti motamai ar nematomai užteršta kenksmingomis medžiagomis. Taigi pirštines reikia nusimauti taip, kad jų vidinė pusė išsivertų į išorę. Tam iš pradžių patraukite pirštines galikus nuo pirštų. Po to verskite suraukimą ar atlanką į išorę ir šitaip nusimaukite pirštinę. Kad pirštines būtų ir toliau patogiu dėvėti, po kiekvieno naudojimo išvalykite jas vadovaudamiesi valymo ir techninės priežiūros nurodymais. Jei reikia, tai galima ir rekomenduojama daryti nenusiėmus pirštinių.

Prieš darbo pradžią (po darbo pertraukų ir, jei reikia, po rankų plovimo) galite naudoti tinkamą odos valymo priemonę. Dirbdami (prieš darbo pertraukas ir darbo pabaigą) galite naudoti tinkamą odos valymo priemonę. Po darbo (po paskutinio rankų plovimo) galite naudoti tinkamą odos priežiūros priemonę. Valymas / techninė priežiūra: Šis gaminyis skirtas naudoti vieną kartą, o jo atliekos turi būti tinkamai sutvarkytos. Tinka naudoti iki: Žr. pakuotę.

Atliekų tvarkymas: Šį gaminį galite šalinti su buitinėmis atliekomis. Dėl sąmoningo ar netyčinio sąlyčio su chemikalais šis gaminyis gali būti užterštas aplinkai kenksmingomis ar pavojingomis medžiagomis. Tokiu atveju gaminio atliekos turi būti tvarkomos laikantis galiojančių vietos teisės aktų. Specialieji nurodymai: AAP jautriems asmenims gali sukelti alergines reakcijas. Būkite ypač atsargūs, jei žinote apie padidėjusį jautrumą. Šiame gaminyje yra natūraliojo kaučiuko latekso, kuris gali sukelti alergines reakcijas (taip pat ir anafilaktinį šoką) arba alergiją.

		
Sąlyčiai su maisto produktais	AQL < 1,5 (Veiksmingumo lygiai 2, G1)	Medicinos prietaisų ženkinimas
		
Gaminiojas	Pagaminimo data: Žr. pakuotę.	Tinka naudoti iki: Žr. pakuotę.
		
EAC ženklas	UkrSepro ženklas	Perskaitykite gamintojo instrukcijas ir informaciją
		
EAC ženklas	UkrSepro ženklas	Perskaitykite gamintojo instrukcijas ir informaciją

MT

Struzzjonijiet u taghriř tal-manifattur

Fuljett ta' taghriř għal taghmir ta' protezzjoni personali (PPE - personal protective equipment) b'konformità mar-Regolament (UE) 2016/425, Anness II punt 1.4. Jekk jogħġbok agra l-fuljett ta' taghriř b'attenzjoni qabel ma tuża l-PPE. Inti obliggat li teħmez dan il-fuljett ta' taghriř meta tghaddi l-PPE jew taghtih l-ir-reċivatur tal-PPE. Għal dan il-għan, dan il-fuljett ta' taghriř jista' jiġi riprodott mingħajr restrizzjoni.

Ingwanti protettivi	Kategorija ta' riskju I
Daqs(ijiet)	S - XL
Attestazzjoni	-

Il-marka CE tiċertifika li l-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti essenżjali ta' saħħa u sikurezza ta' Regolament (UE) 2016/425. Id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE tista' tarha f'www.doc.nitras.de
Dan il-prodott hu taghmir personali protettiv ta' kategorija ta' riskju I. Huwa jiproteġik kontra riskji minuri. Dawn jinkludu griehi mekkanici superficiali, kuntatt minn aġenti tat-tindif aggressivi/effettivi ħfief jew kuntatt fit-tul mal-ilma, kuntatt ma uċuħ shan li t-temperaatura tagħhom ma taqbiż 50°C. Oqsma oħra t'applikazzjonij għajr dawk insemminja hawn fuq huma esplicitament esklużi. Għaliġk, dan il-prodott ma

jipprovdix protezzjoni minn, fost affarijiet oħra: perikli mekkanici, kimiċi, mikrorganiziġmi, kešħa, riskji termali (shana u/jew nar), xokk elettriku, radjazzjoni, ġetts ta' pressjoni għolja.

Hażna/uzu/isservisjar: Zomm f'post frisk u xott. Zomm „li bogħod mid-dawl tax-xemx diretta, raġġu UV jew għejjun tal-ozonu. Tahżinx f'kundizzjoni mkemmxa jew taħt xi tagħbiġja pizata. Jekk hu possibbli, aħżen jew gorr il-prodott fil-pakkett originali. Influenzi ja bħal dawl, umdiťa, bidliet fit-temperatura u naturali fil-materjal fuq perijodu ta' żmien itwal jistgħu jwasslu għal bidliet fil-proprietajiet tal-prodott. Informazzjoni eżatta fuq iż-żmien ta' hażna u haġja fis-servizz tal-PPE mhix possibbli, peress li z-żewġ parametri jiddependu fuq iż-tip resspett ta' hażna, temperatura, umdiťa, grad ta' xedd u intensiťa ta' uzu, fost affarijiet oħra. Iċċekkja dan il-prodott għal ħsara jew bidliet fil-materjal (eż. kisi fragli, imxaqqaq/materjal, toqob, bidliet fil-kulur eċċ) wara hażna fit-tul u qabel u wara kull uzu. Qabel kull uzu, iċċekkja dan il-prodott għal adattabilita għall-attiviťa maħsuba u għad-daqs korrett. Prodotti mhux adattati u difettużi għandhom jintremew u ma jintużawx aktar. Id-daqs tal-prodott jista' jvarja mill-ispecifikazzjonijiet eż. minħabba tmatir.

Struzzjonijiet dwar kif tilbes il-prodott: Kun żgur li idejġ ikunu nodfa u xotti qabel ma tilbes l-ingwanti. Dahħal subgħajk fil-ingwanta rispettiva u dahħal b'mod maħlul l-ingwanta qo idejġ fuq il-polz innitjat. Kun żgur li d-daqs ikun korrett. L-ingwanti għandhom jogħġodu ssikkati u komdi fuq il-pala tal-id, is-swaba u l-ispaġġi ta' bejn is-swaba'. Id-dwiefer tas-swaba, gojellerija, tmatir eċċessiv u tigbid jistgħu jagħmlu ħsara lill-ingwanti. L-ingwanti għandhom jitneżżgħu wara l-uzu b'mod li n-naha ta' barra tal-ingwanti ma jiġux f'kuntatt mal-ilbies jew il-gilda, peress li l-ingwanti jistgħu jkunu vizibilmnt jew invizibilmnt imniġġa b'sustanzi dannużi. Għaldaqstant, il-parti ta' ġewwa trid toħroġ fuq barra. L-ewwel nehhi t-truf tal-iswaba' tal-ingwanta mill-iswaba'. Il-polz innitjat jista' mbagħad jitgerbeħ il barra sabieħ l-ingwanta titneħħa. Sabieħ jigi żġurat li l-ingwanta żżomm il-kumdiťa tagħha, għandha tinaddaf wara kull uzu skont l-istruzzjonijiet ta' tindif u manutenzjoni. Jekk meħtieġ, dan jista' u għandu jsir bl-ingwanti millbusin.

Prodott adattat li jiproteġi l-gilda jista' jintuża qabel tibda x-xogħol (wara waqfet u jekk meħtieġ wara li jinħaslu l-idejn). Waqt ix-xogħol (qabel waqfet u qabel tmieim ix-xogħol) cleanser adattat għall-ġilda jista' jintuża. Wara x-xogħol (wara l-aħħar tahlilha tal-idejn) prodott adattat għall-kura tal-ġilda jista' jintuża. Tindif/manutenzjoni: Dan il-prodott hu maħsub għal uzu ta' darba u għandu jintrena regolament. Data ta' skadenza: Ara l-ippakkjař.

Rimi: Armi mal-iskart domestiku. Dan il-prodott jista' jiġi mniġġeħ b'sustanzi li jagħmlu ħsara lill-ambjent jew sustanzi dannużi wara kuntatt maħsub jew mhux maħsub ma' kimiċi. F'dan il-każ, ir-rimi għandu jsir b'konformiťa mar-regolamenti legali lokali.

Noti speċjali: PPE jista' jikkawża reazzjonijiet allergiċi. Attenzjoni speċjali hi rakkomandata f'każ ta' sensittività eċċessiva maġġurfa.

Dan il-prodott fih latex tal-lastku naturali li jista' jikkawna reazzjonijiet allergiċi li jinkludu reazzjonijiet anafilattiċi jew allergiji.

		
Għal kuntatt mal-ikel	AQL < 1,5 (Livell ta' prestazzjoni 2, G1)	Tikkettjař ta' apparat mediku
		
Manifattur	Data tal-Manifattura: Ara l-ippakkjař.	Data ta' skadenza: Ara l-ippakkjař.
		
EAC TP TC 019/0011 Immarkar EAC	Immarkar UkrSepro	Agra l-istruzzjonijiet u t-tagħriř tal-manifattur
		
EAC TP TC 019/0011 Immarkar EAC	Immarkar UkrSepro	Agra l-istruzzjonijiet u t-tagħriř tal-manifattur

UK

Керівництво й інформація виробника

Інформаційний буклет про засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) згідно з Директивою (ЄС) 2016/425, Додатком II розділом 1.4. Уважно прочитайте цей інформаційний буклет перед застосуванням ЗІЗ. У разі передачі ЗІЗ ви зобов'язані передати цей інформаційний буклет отримувачу ЗІЗ. Для цієї мети цей інформаційний буклет можна розмножувати в будь-якій кількості примірників.

Захисні рукавиці	Категорія ризику I
Розмір(-и)	S - XL
Сертифікація	-

Маркування CE засвідчує, що цей виріб відповідає основним вимогам з техніки безпеки й охорони праці Директиви (ЄС) 2016/425. З декларацією відповідності стандартам ЄС можна ознайомитись на сайті www.doc.nitras.de.

Цей виріб являє собою засіб індивідуального захисту категорії ризику I. Він захищає вас від незначних ризиків. До таких належать виключно поверхові механічні травми, контакт зі слабоагресивними/слабкими засобами чищення або тривалий контакт з водою, контакт з гарячими поверхнями, температура яких не перевищує 50 °C. Цей виріб не захищає від механічних ризиків, хімічних речовин та мікроорганізмів, холоду, теплових ризиків (висока температура та/або вогонь), уражень електричним струмом, випромінювання, робіт під високим напором.

Зберігання/використання/контроль: Зберігайте в холодному й сухому місці. Захищайте від прямих сонячних променів, УФ-випромінювання та джерел озону. Не зберігайте в зігнутому стані або під вагою. За можливістю зберігайте/транспортуйте виріб в оригінальній упаковці. Такі впливи, як світло, волога, температура та природні зміни матеріалу, протягом тривалого часу можуть призвести до зміни властивостей виробу. Надати точні дані про час і тривалість зберігання ЗІЗ неможливо, оскільки обидва параметри, зокрема, залежать від типу зберігання, температури, вологн, ступеню знущення та інтенсивності використання. Тому під час довготривалого зберігання перед кожним використанням і після кожного використання перевіряйте цей виріб на наявність пошкоджень і змін матеріалу (наприклад, ламкі, потірісані покриття/матеріали, перфорація, зміни кольору тощо).

Перед кожним використанням перевіряйте придатність цього виробу до передбаченої роботи та правильність його розміру. Невідповідні або дефектні вироби потрібно утилізувати й за жодних обставин не використовувати їх. Розмір виробу може відрізнятись від заявленого, наприклад, через розширення.

Інструкції з використання виробу: Перед надяганням рукавиць помійте й висушіть руки. Вставте пальці у відповідну рукавицю й вдягніть її за в'язану краву або манжету, не натягуючи. Оптимально розташуйте рукавицю на руці. Рукавиці повинні щільно прилягати до долоні, пальців і проміжків між пальцями. Нігті, прикраси, а також надмірне натягування й розтягування можуть пошкодити рукавицю. Після використання рукавиці потрібно зняти таким чином, щоб біля зовнішня частина не торкалася одягу й шкіри, оскільки вони можуть бути забруднені шкідливими речовинами, які не торкалася одягу й шкіри, оскільки вони можуть бути забруднені шкідливими речовинами, які не завжди можна помітити. Тому рукавиці потрібно знімати внутрішньою стороною назовні. Для цього спочатку відтягніть пальці рукавиці від пальців. Потім можна закотити в'язану краву або манжету назовні, щоб стягнути рукавицю. Для комфортного використання після кожної роботи рукавиці потрібно чистити згідно з вказівками з очищення й техобслуговування. У разі необхідності це можна робити й під час носіння рукавиць.

Перед початком роботи (після перерв та в разі необхідності після миття рук) можна використовувати відповідний засіб для захисту рукавиць. Під час роботи (перед перервами та перед завершенням роботи) можна скористатися засобом для чищення рук. Після роботи (після останнього миття рук) можна скористатися відповідним засобом для догляду за руками.

Чистка / уход: Это изделие предназначено для одноразового использования и должно регулярно утилизироваться. Истечение срока годности: Смотри упаковку.

Утилізація: Утилізуйте цей виріб разом з побутовим сміттям. Після навісногого або ненавісного контакту з хімікатами цей виріб може бути забруднений шкідливими для довкілля або небезпечними речовинами. У такому випадку його потрібно утилізувати згідно з чинними місцевими правовими нормами.

Особливі вказівки: ЗІЗ може викликати алергійні реакції в людей, що мають підвищену чутливість. Якщо вам відомо, що ви маєте підвищену чутливість, будьте дуже обережні.

Цей виріб містить латекс на основі натурального каучуку, що може викликати алергійні реакції, зокрема анафілактичні реакції та алергії.

		
Для контакта с пищевыми продуктами	AQL < 1,5 (Ступені захисту 2, G1)	Маркування медичних виробів
		
Виробник	Дата виготовлення: Смотри упаковку.	Истечение срока годности: Смотри упаковку.
		
Маркування EAC	Маркування UkrSepro	Прочитайте керівництво й інформацію виробника
		
Маркування EAC	Маркування UkrSepro	Прочитайте керівництво й інформацію виробника

AR

Теліаціїа и معلومات الجهة الصانعة
كتب معلومات بخصوص معدات الحماية الشخصية (PSA) وفقًا للاتحة 2016/425 EU. ملحق 2 فقرة 1.4. يرجى قراءة كتيب المعلومات هذا باستغافة قبل استخدام معدات الحماية الشخصية. وأنت ملزم بإرفاق هذا الكتيب عند تسليم معدات الحماية الشخصية لطرف ثا، أو عند بيعها لشخص آخر. ولهذا الغرض يمكن نسخ كتيب المعلومات هذا دون قيود.

قفازات واقية	فئة المخاطر I
المقاس (المقاسات)	S - XL
الاعتماد	-

تشير علامة CE إلى أن المنتج متوافق مع متطلبات الصحة والسلامة الأساسية بموجب لاتحة 2016/425 EU . يمكن الاطلاع على بيان المطابقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي من خلال الموقع www.doc.nitras.de.

هذا المنتج عبارة عن معدات وقاية شخصية من فئة المخاطر I، وهي تحميك من المخاطر الطفيفة ويشمل ذلك الإصابات الميكانيكية السطحية، وملامسة مواد التنظيف قليلة الخضر/التغالبية، أو ملامسة الماء لفترة طويلة أو ملامسة الأسطح الساخنة التي لا تتجاوز درجة حرارتها 50°م. ولا يوفر هذا المنتج حماية من المخاطر الميكانيكية والمواد الكيميائية والجراثيم والبرودة والمخاطر الحرارية (الحرارة أو النار أو كالأهبا) والصدمات الكهربائية والإشعاعات والتعامل مع أشعة الضغط العالي.

التخزين / الاستخدام / الفحص: يُخزن في مكان بارد وجاف. يجب إلقاؤه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو الأشعة فوق البنفسجية أو مصادر الأوزون. لا يُخزن إذا كان ممتلئًا أو واقفا تحت وزن زائد. يجب تخزين المنتج أو نقله في العبوة الأصلية إن أمكن. يمكن أن تؤدي مؤثرات مثل الضوء والرطوبة ودرجة الحرارة فشلًا عن تفورات الغامات الطبيعية على مدى فترة طويلة نسبيًا، إلى تغير في خصائص المنتج. وليست هناك معلومات دقيقة متاحة عن فترة التخزين والعمر الافتراضي لمعدات الحماية الشخصية. نظرًا لأن كلا الصنيرين - من بين أمور أخرى - يعتمدان على كل من نوع التخزين ودرجة الحرارة والرطوبة ودرجة الاستهلاك وكثافة الاستخدام. لذلك الحصى هذا المنتج بعد التخزين لفترة طويلة نسبيًا وقبل كل استخدام وبعده من حيث تغير خاماته (مثل هشاشة وتشقق الطبقات / الغامات، ومن حيث وجود لقوق، وتغيرات في اللون، وما إلى ذلك). تأكد قبل كل استخدام من مدى ملاءمة المنتج للنشاط المرغوب من حيث المقاس الصحيح. ويجب التخلص من المنتجات غير المناسبة أو المعيبة، ويجب ألا تُستخدم بأي حال من الأحوال. علما بأنه يمكن أن يختلف مقاس المنتج عن المواصفات، بسبب التمدد على سبيل المثال.

تعليمات ارتداء المنتج: تأكد من أن يديك نظيفتين وجافتين قبل ارتداء القفازات. أدخل أصابعك في القفاز المعني ثم اسحب القفاز من إسر المصمم أو من طرفه برقى على يديك. ويراعى في هذه الأثناء أن يكون القفاز ملائم لمقاس يديك. حيث ينبغي أن يكون مشدودا ومتنسقا على اليد والأصابع والحووات التي بين الأصابع. يمكن أن تُلحق الأظافر والمجوهرات وكذلك الإفراط في التمدد والسحب ضررا بالقفازات. وينبغي خلع القفازات بعد الاستخدام بطريقة تمنع تلامس الجهة الخارجية للقفازات مع الملابس أو

الجلد. حيث يمكن أن تكون القفازات ملوثة بواد صارة ظاهرة أو غير ظاهرة. وعليه يجب خلع القفازات بحيث تخرج الجهة الداخلية للخارج. ولهذا الغرض، إيدء بخلع أطراف أصابع القفاز من أصابعك. ويمكن بعدها طي إسر المصمم أو طرف القفاز لكي يتسنى خلع القفاز. وللحفاظ على راحة القفاز، يتعين تنظيفه بعد كل نشاط وفقًا لتعليمات التنظيف والعناية. وإذا لزم الأمر، يمكن بل وتعيين القيام بذلك في أثناء ارتداء القفازات.

وقبل بدء العمل (بعد المتراخات وغسل اليدين إذا لزم الأمر) يمكن استخدام منتج مناسب لحماية الجلد. وفي أثناء العمل (قبل المتراخات وقبل انتهاء العمل) يمكن استخدام منظف جلد مناسب. وبعد العمل (بعد غسل اليدين لآخر مرة) يمكن استخدام مستحضر مناسب للعناية بالجلد.

التنظيف / العناية: هذا المنتج مخصص للاستخدام مرة واحدة، ويجب التخلص منه بطريقة سليمة. تاريخ انتهاء الصلاحية: انظر العبوة.

التكهن: نخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية. في حالة ملامسة مواد كيميائية بشكل مقصود أو غير مقصود، قد يتلوث المنتج بمواد صارة بيئيًا أو خطيرة. وفي هذه الحالة يجب التخلص منه وفقًا للمواث القانونية المعمول بها محليًا.

ملاحظات خاصة: يمكن أن تسبب معدات الحماية الشخصية تفاعلات تحسسية لدى الأفراد المصابين بالحساسية. ويوصى بتوخي الحذر في حالة الإصابة بفرط الحساسية المعروفة.

يحتوي هذا المنتج على لاتكس مطاطي طبيعي يمكن أن يسبب ردود فعل تحسسية بما في ذلك ردود فعل تأقية أو حساسية.

		
للمس الأطعمة	AQL < 1,5 (أداءًا تائي وثنيًا) 2, G1)	وسم الجهاز الطبي
		
الجهة الصانعة	تاريخ التصنيع: انظر العبوة.	تاريخ انتهاء الصلاحية: انظر العبوة.
		
EAC TP TC 019/0011	علامة UkrSepro	اقرأ تعليمات ومعلومات الجهة الصانعة
		
EAC TP TC 019/0011	علامة UkrSepro	اقرأ تعليمات ومعلومات الجهة الصانعة

		
Для контакта с пищевыми продуктами	AQL < 1,5 (Ступені захисту 2, G1)	Маркування медичних виробів
		
Виробник	Дата виготовлення: Смотри упаковку.	Истечение срока годности: Смотри упаковку.
		
Маркування EAC	Маркування UkrSepro	Прочитайте керівництво й інформацію виробника
		
Маркування EAC	Маркування UkrSepro	Прочитайте керівництво й інформацію виробника

AR

تعليمات ومعلومات الجهة الصانعة
كتب معلومات بخصوص معدات الحماية الشخصية (PSA) وفقًا للاتحة 2016/425 EU. ملحق 2 فقرة 1.4. يرجى قراءة كتيب المعلومات هذا باستغافة قبل استخدام معدات الحماية الشخصية. وأنت ملزم بإرفاق هذا الكتيب عند تسليم معدات الحماية الشخصية لطرف ثا، أو عند بيعها لشخص آخر. ولهذا الغرض يمكن نسخ كتيب المعلومات هذا دون قيود.

قفازات واقية	فئة المخاطر I
المقاس (المقاسات)	S - XL
الاعتماد	-

تشير علامة CE إلى أن المنتج متوافق مع متطلبات الصحة والسلامة الأساسية بموجب لاتحة 2016/425 EU . يمكن الاطلاع على بيان المطابقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي من خلال الموقع www.doc.nitras.de.

هذا المنتج عبارة عن معدات وقاية شخصية من فئة المخاطر I، وهي تحميك من المخاطر الطفيفة ويشمل ذلك الإصابات الميكانيكية السطحية، وملامسة مواد التنظيف قليلة الخضر/التغالبية، أو ملامسة الماء لفترة طويلة أو ملامسة الأسطح الساخنة التي لا تتجاوز درجة حرارتها 50°م. ولا يوفر هذا المنتج حماية من المخاطر الميكانيكية والمواد الكيميائية والجراثيم والبرودة والمخاطر الحرارية (الحرارة أو النار أو كالأهبا) والصدمات الكهربائية والإشعاعات والتعامل مع أشعة الضغط العالي.

التخزين / الاستخدام / الفحص: يُخزن في مكان بارد وجاف. يجب إلقاؤه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو الأشعة فوق البنفسجية أو مصادر الأوزون. لا يُخزن إذا كان ممتلئًا أو واقفا تحت وزن زائد. يجب تخزين المنتج أو نقله في العبوة الأصلية إن أمكن. يمكن أن تؤدي مؤثرات مثل الضوء والرطوبة ودرجة الحرارة فشلًا عن تفورات الغامات الطبيعية على مدى فترة طويلة نسبيًا، إلى تغير في خصائص المنتج. وليست هناك معلومات دقيقة متاحة عن فترة التخزين والعمر الافتراضي لمعدات الحماية الشخصية. نظرًا لأن كلا الصنيرين - من بين أمور أخرى - يعتمدان على كل من نوع التخزين ودرجة الحرارة والرطوبة ودرجة الاستهلاك وكثافة الاستخدام. لذلك الحصى هذا المنتج بعد التخزين لفترة طويلة نسبيًا وقبل كل استخدام وبعده من حيث تغير خاماته (مثل هشاشة وتشقق الطبقات / الغامات، ومن حيث وجود لقوق، وتغيرات في اللون، وما إلى ذلك). تأكد قبل كل استخدام من مدى ملاءمة المنتج للنشاط المرغوب من حيث المقاس الصحيح. ويجب التخلص من المنتجات غير المناسبة أو المعيبة، ويجب ألا تُستخدم بأي حال من الأحوال. علما بأنه يمكن أن يختلف مقاس المنتج عن المواصفات، بسبب التمدد على سبيل المثال.

تعليمات ارتداء المنتج: تأكد من أن يديك نظيفتين وجافتين قبل ارتداء القفازات. أدخل أصابعك في القفاز المعني ثم اسحب القفاز من إسر المصمم أو من طرفه برقى على يديك. ويراعى في هذه الأثناء أن يكون القفاز ملائم لمقاس يديك. حيث ينبغي أن يكون مشدودا ومتنسقا على اليد والأصابع والحووات التي بين الأصابع. يمكن أن تُلحق الأظافر والمجوهرات وكذلك الإفراط في التمدد والسحب ضررا بالقفازات. وينبغي خلع القفازات بعد الاستخدام بطريقة تمنع تلامس الجهة الخارجية للقفازات مع الملابس أو